




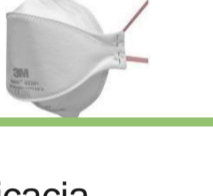






TIPOS DE MASCARILLAS Y ESPECIFICACIONES

	DESCRIPCIÓN	TIPO	EQUIPO DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPI)	FUNCION BARRERA (EVITA PROPAGACIÓN)	OBSERVACIONES	
MASCARILLAS FILTRANTES	<ul style="list-style-type: none"> Norma UNE EN-149:2001+A1:2010. 	FFP 1 sin válvula de exhalación		✓	✓	<ul style="list-style-type: none"> Eficacia de filtración mínima (sólo partículas). No protege frente a microorganismos. No recomendado para uso médico. Limita la propagación del contagio.
	<ul style="list-style-type: none"> Marcado CE (en la propia mascarilla) seguido del número de identificación del organismo notificado. 	FFP 2 sin válvula de exhalación		✓	✓	<ul style="list-style-type: none"> Protege y limita la propagación del contagio.
	<ul style="list-style-type: none"> Reutilizables “R” No Reutilizables “NR” Un único uso 	FFP 2 con válvula de exhalación		✓	✗	<ul style="list-style-type: none"> Protege pero no limita la propagación del contagio.
		FFP 3 con válvula de exhalación		✓	✗	<ul style="list-style-type: none"> Protege pero no limita la propagación del contagio.
		FFP 3 sin válvula de exhalación		✓	✓	<ul style="list-style-type: none"> Protege y limita la propagación del contagio.
MASCARILLAS QUIRÚRGICAS	<ul style="list-style-type: none"> Sigue Norma UNE EN 14683:2019. No reutilizable Un único uso 	Tipo según eficacia de filtración bacteriana (EFB) : <ul style="list-style-type: none"> I ≥ 95% II ≥ 98% IIR ≥ 98% 		✗	✓	<p>La EFB mide la capacidad de la mascarilla para capturar gotículas potencialmente portadoras de bacterias que emite el usuario.</p> <ul style="list-style-type: none"> Tipo I: Solo para pacientes con objeto de reducir el riesgo de transmisión de infecciones. No están previstas para ser utilizadas por personal sanitario en quirófano ni en otros entornos similares. Tipo II: Destinadas a personal sanitario Tipo IIR: Resistentes a salpicaduras de sangre y otros líquidos biológicos. Norma técnica ISO 22609.
MASCARILLAS HIGIÉNICAS	<ul style="list-style-type: none"> Mascarillas higiénicas con especificaciones UNE. 	No reutilizable: UNE 0064 Reutilizable: UNE 0065		✗	✓	<ul style="list-style-type: none"> No protege pero podría limitar la propagación del contagio.
	<ul style="list-style-type: none"> Mascarillas higiénicas reutilizables o no reutilizables Sin especificaciones UNE. 	N.A		✗	✓	<ul style="list-style-type: none"> No protege pero podría limitar la propagación del contagio. No sujeto a norma, eficacia no testada.
	<ul style="list-style-type: none"> Filtros para mascarilla higiénicas reutilizables Sin especificaciones UNE. 	N.A		✗	✓	<ul style="list-style-type: none"> Los filtros deben cumplir el RD 1468/1988 en su etiquetado y el RD 1801/2003 sobre seguridad general.

VERIFICACIÓN DE INFORMACIÓN DE MASCARILLAS FILTRANTES

- Comprobar el Organismo Notificado en el siguiente [link](#).



- Consultar la Verificación de certificados/informes que acompañan a los EPI: [link](#)



ETIQUETADO

- El marcado CE, seguido de cuatro números, asegura que el producto cumple con la legislación.
- La referencia a la norma **UNE EN 149:2001+A1:2010** asegura el cumplimiento de un estándar de calidad.
- El marcaje NR indica que el producto es No Reutilizable y el marcaje R, que es Reutilizable.
- El tipo de mascarilla (FFP1, FFP2, y FFP3) y el filtro (P1, P2 y P3).



También existen otras certificaciones válidas temporalmente durante la crisis de la COVID-19. Estas mascarillas deben estar previamente autorizadas.

VERIFICACIÓN DE INFORMACIÓN DE MASCARILLAS QUIRÚRGICAS



VERIFICACIÓN DE MASCARILLAS HIGIENICAS CON ESPECIFICACIONES UNE

- Referencia a la norma UNE que cumple y en las instrucciones

MASCARILLAS CON ESPECIFICACIONES UNE	EFICACIA DE FILTRACIÓN BACTERIANA (EFB)	RESPIRABILIDAD
NO REUTILIZABLES	IGUAL O SUPERIOR AL 95%	INFERIOR A 60 Pa/CM2
REUTILIZABLES	IGUAL O SUPERIOR AL 90%	

- Nombre del producto
- Talla
- Duración
- Instrucciones
- Composición
- Mantenimiento (Como lavar y nº máx. de lavados)

Puede haber otros fabricantes que muestren resultados de pruebas conforme a otras normas o criterios, pero los resultados no son comparables

VERIFICACIÓN DE MASCARILLAS HIGIENICAS SIN ESPECIFICACIONES UNE

- Referenciar tanto en la mascarilla como en el filtro los modelos de producto y accesorios que son compatibles entre sí, así como la normativa que cumple y los resultados de filtración (solicitar certificados para comprobar).